

∴ **Dermoscopio HEINE DELTA® 20 T**

Óptica de precisión con la posibilidad de alternar entre iluminación polarizada y no polarizada



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.



Imágenes de alta calidad y flexibilidad diagnóstica

El **Dermatoscopio DELTA20 T** ofrece una óptica de precisión sin competencia y, gracias a la función "Toggle", la posibilidad de alternar entre iluminación polarizada y no polarizada sin tener que perder tiempo cambiando los discos de contacto. Al mismo tiempo, puede efectuarse la dermatoscopia de contacto con líquidos de inmersión en todo momento. De este modo, puede adaptarse el tipo de examen a la lesión correspondiente, consiguiendo el mejor diagnóstico posible.



La palabra “calidad” es uno de los términos que más se usa y de los que más se abusa hoy en día a fin de vender productos. No obstante, pocas empresas son capaces de concretar la calidad de sus productos en cuanto a las ventajas y la utilidad que ofrecen al usuario final. HEINE define las ventajas de la calidad HEINE en relación a su rendimiento, función y durabilidad:



RENDIMIENTO

Óptica de precisión HEINE. El sistema óptico acromático de alta calidad proporciona imágenes extremadamente nítidas de alta definición. Por medio del sistema de enfoque se consigue un rango de 10 a 16 aumentos, que permite visualizar con detalle incluso estructuras muy pequeñas.

Están los LED. Y están los LED^{HQ}. HEINE ha establecido un nuevo estándar, que mantiene que solo lo mejor es lo suficientemente bueno desde la selección del material hasta el acabado, desde la intensidad luminosa y la gestión térmica hasta un índice de reproducción del color lo más alto posible. **Lo hemos bautizado como «LED in HEINE Qualität» o, lo que es lo mismo, «LED en calidad HEINE». De ahí la denominación «LED^{HQ}».**



LED NOW IN HEINE QUALITY.



FUNCIÓN

La función “Toggle” permite alternar entre el modo de iluminación polarizado y no polarizado. Cambie cómodamente entre la vista polarizada y no polarizada con solo pulsar un botón. No es necesario cambiar los discos de contacto. La función adicional de diagnóstico permite detectar los “signos del parpadeo” al examinar las estructuras y milaria cristalinas.

Disco de contacto pequeño opcional. Disco de contacto pequeño especial para lesiones de difícil acceso.

Distintas opciones de documentación digital.

Puede conectarse sin problemas a las cámaras réflex de los principales fabricantes por medio del sistema de lentes para cámaras digitales HEINE. Las lentes especialmente adaptadas unen la cámara y la óptica del DELTA 20 T, garantizando la mejor calidad de imagen posible.



DURABILIDAD

HEINE ofrece una garantía de 5 años. HEINE no escatima en la fabricación de instrumentos médicos de la más alta calidad. Nuestro compromiso con la integración vertical en nuestra fabricación significa que controlamos todos los aspectos de la calidad de nuestros instrumentos.

Control térmico del LED. Para un rendimiento uniforme y la estabilidad del producto, el sistema LED debe disponer de una gestión térmica eficaz. La más moderna tecnología de LED del DELTA 20 T, gracias a una estructura optimizada de materiales de alto rendimiento, deriva perfectamente el calor del LED, garantizando así una potencia lumínica constante durante toda su vida útil de hasta 50.000 horas.



INFORMACIÓN DE PEDIDO


Set DELTA20 T con mango recargable BETA4 NT

El set incluye el cabezal de dermatoscopio DELTA20 T, disco de contacto con escala, **mango recargable BETA4 NT con cargador de mesa NT 4**, 10ml de aceite de dermatoscopia, estuche rígido


K-262.24.420

**Set DELTA20 T con mango recargable BETA4 USB**

El set incluye el cabezal de dermatoscopio DELTA20 T, disco de contacto con escala, **mango recargable BETA4 USB con cable USB y fuente de alimentación de enchufe**, soporte especial para el mango, 10ml de aceite de dermatoscopia, estuche rígido

K-262.28.388 

El set incluye el cabezal de dermatoscopio DELTA20 T, disco de contacto con escala, **mango recargable BETA4 USB**, 10ml de aceite de dermatoscopia, estuche rígido

K-262.28.387 **Set DELTA20 T con mango a pilas BETA**

El set incluye el cabezal de dermatoscopio DELTA20 T, disco de contacto con escala, **mango a pilas BETA**, 10ml de aceite de dermatoscopia, estuche rígido


K-262.10.118

**Adaptador fotográfico SLR**

Con óptica para dermatoscopio/cámara de reflejo digital.
Gran campo de visión, imagen nítida.

para Canon K-000.34.185

para Nikon K-000.34.186

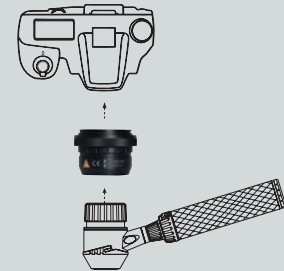

Encontrara más informacion y más configuraciones en www.heine.com

Reservado el derecho a modificación sin previo aviso.
© 2019 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Todos los derechos reservados.

Su distribuidor

01/19. A-000.00.212 s